

Brugervejledning KK901





Indholdsfortegnelse

Advarsel og sikkerhedsforskrifter	3
Produktbeskrivelse.....	5
Ibrugtagning.....	5
Kontrol af dækningsområde	5
Betjening.....	6
Placering.....	6
Batterialarm	7
Udskiftning af batteri	7
Rengøring	7
Reservedele og tilbehør	7
Tekniske data	8
Symbolforklaring og godkendelser	9

Advarsel og sikkerhedsforskrifter



- Anvendte batterier skal overholde de relevante IEC-sikkerhedsstandarder.
- Indtag/spis ikke batteriet, kemisk forbrændingsfare.
- Hold nye og brugte batterier væk fra børn.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes forsvarligt, skal produktet kasseres og holdes væk fra børn.
- Læs tilsigtet anvendelse inden ibrugtagning.
- Produktet er ikke vandafvisende, medmindre det er angivet i produktspecifikationen.

Kontraindikationer

Generelt kan produktet ikke bruges, hvis:

- Den handicappede klient/patient er psykisk syg.
- Den handicappede klient/patient er kritisk syg.
- Klienten/patienten er ikke i stand til at bruge senderen.

Levetid efter montering af enheden

Batteriet skal i givet fald udskiftes, når informationen om udskiftning af batteri vises på produktet og i henhold til brugermanualen.

Levetiden vurderes i forhold til trykknappen. Denne er lavet i henhold til leverandørens specifikation.

Levetid for batteri (gældende for produkter med batteri)

KNOP beregner batteriernes levetid. Se specifikation i brugermanualen.

Tilsigtet brug

Generelt er de forskellige varianter af det medicinske udstyr (transmittere/modtagersystem fra KNOP Elektronik) lavet som et hjælpemiddel til handicappede/patienter, så de kan tilkalde hjælp.

De forskellige varianter af det medicinske udstyr består af en kombination af produkter (transmitter og modtager), der er designet til at tilkalde hjælp til svækkede/handicappede patienter; sender-modtagersystemet kan aktiveres på forskellige måder:

- F.eks. patienter, der aktivt gør det og er klar over, at de tilkalder hjælp, som f.eks. gangbesværede, der har brug for hjælp til at gå på toilettet.



- Eller handicappede patienter, som ikke er klar over, at de uforvarende lægger pres på transmitteren, f.eks. under en krampe.
- Eller patienter med intellektuelle og kognitive mangler, som ikke er klar over, at en modtager, modtager et signal fra deres sender, når de forlader et hus eller et rum.

Systemet er ikke designet til kritisk eller psykisk syge personer.

Generel produktbeskrivelse

Produkterne fra KNOP Elektronik består af flere varianter af sendere og modtagere, som kan kombineres med hinanden. Derudover bruges disse produkter i kombination med positionerings- og repeatersystemer.

Disse produkter er medicinsk udstyr, der er beregnet til at tilkalde hjælp og bruges til handicappede/mobile personer, f.eks. gangbesværede, der har brug for hjælp til at gå på toilettet. Senderne aktiveres f.eks. af en lyd eller et tryk (f.eks. et tryk med en finger eller et pust fra munden). Modtageren overvåges af sundhedspersonale eller lægfolk i private hjem.

Systemet er ikke designet til kritisk eller psykisk syge mennesker.

En del af produktet	Funktion i produktsystemet
Sender	Senderen kan sende signalet fra patienten til modtageren, der overvåges af sundhedspersonalet eller en lægmand. Senderprodukterne kan aktiveres med knap, lyd, pust eller bevægelser.
Modtager	Senderne kan kodes til alle modtagere og til flere modtagere på samme tid. Nogle modtagere har også en tilkaldeknap, så de kan tilkalde hjælp fra deres kollegaer.
Repeatersystem	Hvis der er behov for at dække et mere omfattende og større område, bruges et repeatersystem. Repeatersystemet giver også en øget funktionalitet, som f.eks. at en alarm automatisk modtages først af den sundhedsperson, der er tættest på klienten.
Positionssystem	Hvis en sender er udstyret med en positionsmodtager, kan den bruges i forbindelse med et positionssystem. Ikke alle produktvarianter inkluderer positionsmodtagere. Det ses typisk i forbindelse med plejehjem og sikkerhed for demente. Modtagerne kan være bærbare eller stationære.



Produktbeskrivelse

Produktet er designet således, at det f.eks. kan placeres tæt på en brugers hoved, så alarmer kan aktiveres, blot brugeren drejer hovedet mod KK901.

KK901 kan anvendes, hvor brugeren ikke er i stand til at aktivere en alarm med træksnor eller trykknop.

KK901 er en sender, som er designet til at sende koder til KNOPs trådløse modtagere.

Vær opmærksom på rækkevidden, som beskrevet i afsnittet "Kontrol af dækningsområde".

Ibrugtagning

Efter opsætning er det vigtigt, at brugeren og personalet afprøver produktet.

Personalet skal modtage en alarm på deres alarmanlæg/modtagere.

Der henvises til brugervejledning for de benyttede modtagere.

Kontrol af dækningsområde

En person aktiverer KK901 (som beskrevet ovenfor), mens en anden går systematisk rundt i området og på en skitse over bygningen og området, hvor der er dækning afmærker. Skitsen lægges på kontoret, så alle, der skal betjene systemet, kan se, hvor der er dækning. Udenfor dækningsområdet kan der ikke modtages alarmer.

Dækningsområdet kan øges ved brug af et repeatersystem fra KNOP Elektronik.

Kontakt din forhandler for nærmere oplysning.



Betjening

Når brugeren aktiverer KK901, vil den blinke med grønt lys.

Modtageren vil sende en kvittering, hvorefter KK901 vil lyse konstant grøn, som indikation af at transmissionen lykkedes.

Hvis transmissionen ikke lykkes, vil KK901 lyse med rødt lys, hvorefter KK901 vil gentage transmissionen op til 2 gange med 30 sekunders interval.

Placering

KK901 skal placeres således, at brugeren nemt kan aktivere bolden på kontakten.


Kindkontakten kan f.eks. monteres på en svane Hals. Kontakt evt. din forhandler for nærmere oplysning.

Batterialarm

Ved dårligt batteri i KK901, vil modtageren vise "Lavt batteri", når der modtages en alarm.

Udskiftning af batteri

Top og bund på KK901 skrues fra hinanden uden brug af værktøj.

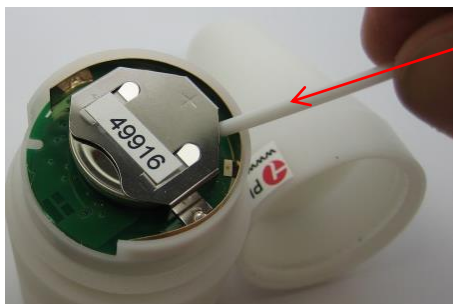

Batteriet skubbes forsigtigt ud af holderen, med enden af f.eks. en vatpind eller tændstik.

Brug aldrig en metalgenstand.

Det nye batteri føres forsigtig ind i holderen **UDEN** brug af værktøj, da det kan kortslutte batteriet.

Anvend et CR2477 batteri. + skal vende op ad.

Efter batteriskift kontrolleres KK901 som beskrevet under "Test og ibrugtagning".

Rengøring

Produktet kan rengøres med en fugtig klud eller spritserviet.

Reservedele og tilbehør

Reservedele og tilbehør kan bestilles på vores hjemmeside www.knop.dk



Tekniske data

Frekvens HF:	869,2125 MHz
Rækkevidde:	Optil 500m i fri sigt til en RX901B ⁽¹⁾
Batteritype:	CR2477, Litium 3V 950 mAh (Før S/N 57028 CR2354)
Batterilevetid (forventet):	Op til 5 år ved 5 aktiveringer pr. døgn. ⁽²⁾
Lav batteri alarm:	Ved ca. 1/3 rest kapacitet
Omgivelsesmiljø:	Indendørs brug. ≤ 90% ikke kondenserende
Omgivelsestemperatur:	0°C to +40°C
Kabinettype:	Hvid polyoxymethylen
Kabinetdimensioner:	Ø: 43mm L: 106mm
Gevind for montering:	3/8"
Tæthed:	IP40
Vægt:	90g

Ret til ændringer forbeholdes.

All rights reserved.

© **KNOP** Elektronik A/S

⁽¹⁾ Målt udendørs med fri sigt mellem sender og modtager. I bygninger, er rækkevidden reduceret.

⁽²⁾ Forventet batterilevetid afhænger af brug og batterifabrikat.

Symbolforklaring og godkendelser

	Dette produkt overholder disse standarder og direktiver: Directive 2017/745/EU MDR Directive 1907/2006/EU REACH Directive 2011/65/EU RoHS Directive 2012/19/EU WEEE ISO 14971:2019 Risk Management for Medical devices EN 301 498-1 V2.2.3 Electro Magnetic Compatibility EN 301 489-3 V3.1.1 Electro Magnetic Compatibility EN 50130-4:2011 + 2014 Immunity alarm systems EN 300 220-1 V3.1.1 Short Range Devices EN 300 220-2 V3.1.1 Short Range Devices EN 300 220-3 V2.1.1 Short Range Devices EN 60601-1-2:2014 + 2015 Electromagnetic compatibility (Medical) EN 62368-1:2020 Electrical safety EN 50581:2012 Hazardous substances
	Produktet må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.
	Medical Device Klasse 1, regel 1
	Manufacturer KNOP Elektronik A/S, Fabriksvej 20, DK-7600 Struer
	Læs manual(er) før installation og ibrugtagning. Find manual her: https://www.knop.dk
	Der kan ske interferens i omgivelserne af udstyr mærket med dette symbol.
	Skal beskyttes imod væske.
	0°C to +40°C, temperaturgrænse for transport/opbevaring og anvendelse.
	Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
	Single Registration Number DK-MF-000025631
	Unique Device Identifier KK901: 05744002850397 KK901P: 05744002850373
	Product reference KK901: Kindkontakt KK901P: Kindkontakt med position
	Serial Number Serienummeret er placeret på produktet
	Ingress Protection kode IP40