

Bruksanvisning

RX901B





Innehållsförteckning

Varningar och säkerhetsanvisningar	3
Produktbeskrivning	5
Driftsättning	6
Startskärmen	7
Nödsamtal	9
Klienter och sändare	11
Huvudmeny	12
Underhåll	24
Rengöring	24
Reservdelar och tillbehör	24
Kontrollera täckningsområdet	25
Tekniska data	26
Symbolförklaring och godkännanden	27

Varningar och säkerhetsanvisningar



- Batteriet i den här produkten uppfyller de relevanta IEC-säkerhetsstandarderna för batterier.
- Läs säkerhetsinstruktionerna på nätaggregatet innan du använder det.
- Strömförsörjningsenheten måste uppfylla relevanta IEC-säkerhetsstandarder.
- När du byter ut strömförsörjningsenheten eller laddningsplattan måste du använda original och/eller godkända enheter.
- Batteriet får inte bytas ut, utan produkten måste skickas för reparation.
- Läs den avsedda användningen innan du tar den i bruk.
- Produkten är inte vattenresistent om inte annat anges i produktspecifikationen.

Kontraindikationer

I allmänhet kan produkten inte användas om:

- den funktionshindrade klienten/patienten är psykiskt sjuk
- den funktionshindrade klienten/patienten är svårt sjuk
- klienten/patienten inte kan använda sändarna.

Livslängd efter montering av enheten

Batteriet, om tillämpligt, måste bytas ut när informationen om batteribyte visas på produkten och i enlighet med bruksanvisningen.

Livslängden bedöms i förhållande till tryckknappen. Detta görs enligt leverantörens specifikation.

Batteriets livslängd (endast för produkter med batteri)

KNOP beräknar batteriernas livslängd. Livslängden är normalt mer än 2 år beroende på produkttyp, se specifikation i bruksanvisningen.

Allmän avsedd användning

I allmänhet är de olika varianterna av den medicintekniska produkten (sändare/mottagarsystem från KNOP Elektronik) tillverkade som hjälpmedel för att patienter med funktionsnedsättning ska kunna kalla på hjälp.

De olika varianterna av den medicinska utrustningen består av en kombination av produkter (sändare och mottagare) som är utformade för att kalla på hjälp till funktionsnedsatta/funktionshindrade patienter; sändar-mottagarsystemet kan aktiveras på olika sätt:



- Till exempel patienter som aktivt gör detta och är medvetna om att de kallar på hjälp, som t.ex. personer med gångsvårigheter som behöver hjälp med att gå på toaletten.
- Eller funktionshindrade patienter som inte är medvetna om att de oavsiktligt trycker på sändaren, t.ex. under en kramp.
- Eller patienter med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar som inte är medvetna om att en mottagare tar emot en signal från deras sändare när de lämnar ett hus eller ett rum.

Systemet är inte utformat för kritiskt sjuka eller psykiskt sjuka personer.

Allmän produktbeskrivning

Produkterna från KNOP Elektronik består av flera olika varianter av sändare och mottagare som kan kombineras med varandra. Dessutom används dessa produkter i kombination med positionerings- och repeatersystem.

Dessa produkter är medicintekniska produkter som är avsedda att kalla på hjälp och används för funktionshindrade/mobila personer, t.ex. personer med gångsvårigheter som behöver hjälp med att gå på toaletten. Sändarna aktiveras t.ex. genom ett ljud eller genom tryck (t.ex. genom tryck med ett finger eller ett andetag genom munnen). Mottagaren övervakas av vårdpersonal eller lekmän i privata hem.

Systemet är inte utformat för kritiskt sjuka eller psykiskt sjuka personer.

Produktdel	Funktion i produktsystemet
Sändare	Sändaren kan skicka signalen från patienten till en mottagare som övervakas av vårdpersonal eller lekmän. Sändarprodukterna kan aktiveras av knapptryckning, ljud, blåsning eller rörelser.
Mottagare	Sändarna kan koda in i alla mottagare och till flera mottagare samtidigt. Vissa mottagare har också en tillkallningsknapp för att kalla på hjälp från sina medarbetare.
Repeatersystem	Om det behövs för att täcka ett mer omfattande och större område används ett repeatersystem. Repeatersystemet ger också en ökad funktionalitet som t.ex. att ett larm automatiskt tas emot först av den vårdpersonal som är närmast klienten.
Positionssystem	Om en sändare är utrustad med en positionsmottagare kan den användas i anslutning till ett positionssystem. Inte alla produktvarianter inkluderar positionsmottagare. Vanligtvis används de i samband med vårdhem och för säkerhet för patienter med demens. Mottagarna kan vara bärbara eller stationära.



Produktbeskrivning

RX901B är en mottagare som är utformad för att fungera med KNOP:s trådlösa enheter.

Enheten kan bäras i en ficka eller på ett halsband runt halsen.

Upp till 250 sändare kan kodas och tilldelas ett valfritt namn.

De senaste 50 samtalen lagras i en lista där du kan se tiden för samtalet, var samtalet kom ifrån och om det bekräftades.

Med en RX901B är det till exempel möjligt att dela in klient(boende) på en vårdinstitution i grupper, till exempel i samband med skiftplaner, där nattskiftet måste betjäna fler klienter än dagskiftet.

RX901B är utrustad med en positionsläsare, så den kan användas i KNOP positionerings-systemet.

Med RX901B är det möjligt att ringa ett nödsamtal till en annan kollega med en enda beröring.

Användningen är menystrukturerad i en grafisk display och styrs med hjälp av tangentbordet.

RX901B är utrustad med ett uppladdningsbart batteri och trådlös laddning.

Produkten är vattentät (IP65).

Driftsättning

Det rekommenderas att RX901B laddas till 100 % innan den används.

Den medföljande trådlösa laddaren ansluts till adaptern via USB-kabeln.

RX901B placeras ovanpå laddningsplattan och RX901B:s display tänds och visar batteriets laddningsnivå i procent.

Om enheten är helt urladdad kan det ta upp till 5 minuter innan displayen tänds.

Paketets innehåll:



RX901B i laddaren:



När produkten slås på första gången måste det önskade språket väljas.



Tryck för att flytta den gröna pilen till önskat språk.

Tryck för att välja språk.

Startskärmen

Första gången enheten ska sättas på efter upppackning ska den placeras på laddaren.

När RX901B inte är ansluten till laddaren stängs skärmen av cirka 10 sekunder efter den senaste åtgärden.

Om du trycker på någon tangent slås displayen på och visar klockan och datumet.

Användarens namn visas överst om det är kodat på annat sätt "RX901B".



Alternativ för startskärmen:



Namnet på t.ex. en produkt eller en plats kan ändras till önskat namn.

Aktuell tid och datum visas i vit text.

Klockan måste ställas in.

Batteriläge:

- Batteri OK.
- Laddning rekommenderas.
- Batteriet är nästan slut och behöver laddas.

Larmljud:

- Larmljudet är påslaget.
- Larmljudet är avstängt.

Vibrator:

- Vibratorn är aktiverad.
- Vibratorn är avstängd.

System - visas endast om systemet är anslutet:

- Systemet är anslutet.
- Ansluts till systemet.
- Avbrott i systemets signal.
- Systemsignalen har gått förlorad.

Tryck för att se samtalslistan.



Mottagning av larm

När mottagaren tar emot ett larm från en kodad sändare visas namn, typ och tidpunkt för mottagningen samt eventuell position.



Klientens namn
Namnet på den valda platsen i huset.
Typ av sändare.
Positionering för larmet.
Nödknapp/funktion.

De enskilda texterna visas endast om de är kodade eller kända.

Tryck  för att bekräfta larmet.

Tryck  för att förkasta.

Obs: I det enkla systemet hanteras larmsamtalet på samma sätt, oavsett om det accepteras eller avvisas, i stället för som i KNOP:s repeater-system (MR90X/RP90X) där larmet automatiskt vidarebefordras till andra mottagare.

Om larmet inte besvaras hörs korta ljud ungefär var femte minut.

När ett meddelande tas emot från en sändare, t.ex. med lågt batteri, visas nedanstående meddelande.



Tryck  för att bekräfta larmet.

Obs: "Senaste samtal" visar meddelandet "långt batteri" för den sändare där batteriet måste bytas ut.



Nödsamtal

Det är möjligt att skicka ett nödsamtal (eller larm) från mottagaren till exempel andra användare för att ange "Jag behöver hjälp" hos en klient eller som ett överfallslarm.

Nödsamtalet aktiveras genom att trycka på KNOP-logotypen.

När nödsamtalet skickas vibrerar mottagaren en gång och när nödsamtalet tas emot av en annan användare vibrerar mottagaren tre gånger.





Batterilarm

Mottagaren indikerar batteristatusen på displayen och vid urladdat batteri med ljudindikationer.

Batteriläge:

-  Batteri OK.
-  Laddning rekommenderas.
-  Batteriet är nästan slut och behöver laddas.

Om symbolen ändras till rött ska du omedelbart sätta enheten i laddaren.
Samtidigt hörs några korta pip ungefär var femte minut, vilket indikerar lågt batteri, medan skärmen nedan visas:





Klienter och sändare

Innan du kan koda en sändare i mottagaren måste du skapa en klient som sändaren tillhör.

En klient kan vara en person, ett rum eller något annat. klienten kan till exempel vara "Andersson" (som används som exempel).

Vår klient "Sven" kan ha en eller flera sändare som är kopplade till den.

Sven (vår klient) har till exempel en armbandssändare, ett sängalarm, en rörelsesensor och andra produkter.

När "Sven" aktiverar ett larm från sina produkter visar displayen att larmet kommer från "Sven" och vilken produkt som är avsändare, så att orsaken till larmet är känd från början.

Detta förutsätter naturligtvis att namn etc. kodas på önskat sätt.

Klienter skapade under Inställningar / Klient / Ny klient:

Huvud meny	Inställningar	Klienter
↑ Stäng (sova) Gruppval Vibration: Till Ljud: Från → Inställningar	Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Ändre grupp ↓ Ställ in klocka	→ Ny klient Sven Alla sändare

Lägg till under Inställning / Klient / Klient (Sven) / Ny Sändare:


Huvud meny	Inställningar	Klienter	Sven
↑ Stäng (sova) Gruppval Vibration: Till Ljud: Från → Inställningar	Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Ändre grupp ↓ Ställ in klocka	Ny klient → Sven Alla sändare	Rom 10 TX901 → Ny sändare Gruppval Klientnamn ↓



Huvudmeny

Om du trycker på  och  samtidigt, antingen när skärmen är avstängd eller på startskärmen, öppnas huvudmenyn.

Den gröna pilen till vänster visar vilken rad i menyn som kan väljas.

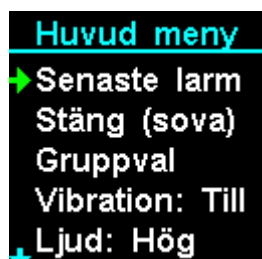

Knapparnas funktion:

Tryck  för att flytta den gröna pilen antingen uppåt eller åt höger i menyn.


Tryck  för att flytta den gröna pilen antingen nedåt eller åt vänster i menyn.

Tryck  för att lämna menyn.

Tryck  för att välja menyalternativet med den gröna pilen bredvid.

OBS: Efter c:a 60 sekunders inaktivitet avslutas menyn automatiskt.

Senaste larm:

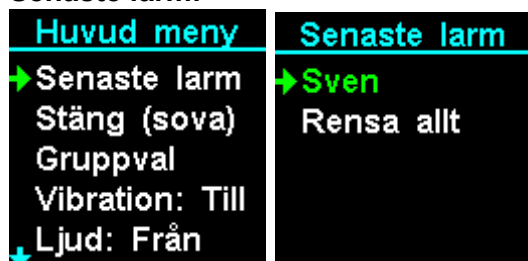

Tryck   för att bläddra mellan olika larm.



Betyder att larmet blev accepterat.

Betyder att larmet blev avvisat.

Betyder att larmet blev obesvarat.

Se mer information kring larmen:



Tryck  för att se vad klientens positionering och vilken sändare larmet kommer ifrån.

Tryck   för att bläddra mellan flera larm.



När man tar emot ett larm från en sändare som har t.ex. ett dåligt batteri visas meddelandet.

  för att bläddra mellan andra larmsamtal.



Radera samtalslistan:




Tryck **Ent** för att bekräfta.

Stäng mottagaren:



Ent För att bekräfta eller **Esc** för att avvisa
Mottagaren slås på genom ett tryck på **Ent**.


Urval av grupp:

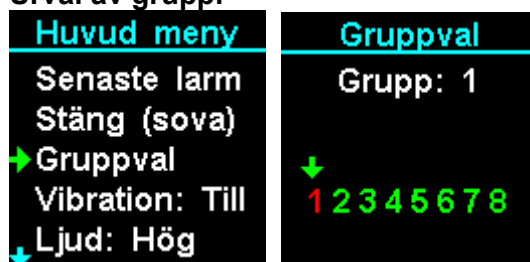

Ent Välja eller avmarkera en grupp.
Esc Återgå till menyn.
↓ **↑** Flytta pilen till den grupp du vill ändra.

1 Grupp markerad
1 Grupp avmarkerad

Vibratorfunktion:

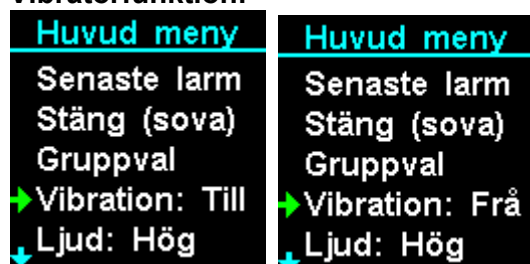

Ent Aktivera eller avmarkera vibratorfunktionen.
Esc Återgå till menyn.

Ljudinställning:



Ent Välj **Hög**, **Låg** eller **Från** ljud för larmsamtal.



Inställningar och kodning:

Huvud meny	Inställningar	Inställningar	Inställningar
↑ Stäng (sova) Gruppval Vibration: Till Ljud: Från → Inställningar	Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Ändra grupp ↓ Ställ in klocka	↑ Ställ in klocka Klick: Låg Produktnamn → Lösenord ↓ Utgående	↑ Utgående Systemmenyn Positioner Språk → Stäng av

Ver: 3.3.14

Produktens programvaruversion.

ID: 58651

Produktens serienummer.

Lägg till ny klient:

Inställningar	Klienter
Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Ändra grupp ↓ Ställ in klocka	→ Ny klient Sven

Ställ pilen på menyvalet och tryck **Ent**.

Ändra klient:

Inställningar	Klienter	Sven
Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Ändra grupp ↓ Ställ in klocka	Ny klient → Sven Alla sändare	Rom 10 → TX901 Ny sändare Gruppval Klientnamn

Sven

Klientens namn.

Rum 10

Valfri text, namn på t.ex. rum.

→ **TX901**

Produkt som redan är inkodade på klienten.



Lägg till sändare:

Sven Rom 10 TX901 → Ny sändare Gruppval Klientnamn	Lägga till Aktivera ny sändare... 
---	--

Aktivera nu den önskade sändaren.

Lägga till ID: 64067 RX901B Lägga till?  
--

Acceptera tillägg.

Lägga till Överför från: Svenson Bekräfta?  

Om sändaren redan är kodad visas nedanstående meny, så att du kan flytta en sändare mellan klienter.

Klienten tillhör dessa grupper:

Sven Rom 10 TX901 Ny sändare → Gruppval Klientnamn	Sven Gruppval Gruppe: 1 ↓ 1 2 3 4 5 6 7 8
---	--



Flytta mellan grupper.



Välja eller bortvald en grupp.



1 Grupp som valts.

1 Grupp som är bortvald.

Klientens namn:

Sven ↑ TX901 Ny sändare Gruppval → Klientnamn Klienttext	Klientnamn Spara? ◆ 4 5 6 7 8 9 a b c d Sven Ange klientnamn
---	---



Flytta bokstav.



Välj bokstav.



Ta bort den senaste bokstaven.

För att spara valt namn välj symbol ◆ och tryck Ent.



Klientens valfria text:

Sven	Sven
↑ Ny sändare	Spara?
Gruppval	◆456789abcd
Klientnamn	Rom 10
→ Klienttext	Ange
Ta bort	klienttext



Flytta bokstav.



Välj bokstav.



Ta bort den senaste bokstaven.

För att spara valt namn välj symbol ◆ och tryck Ent.



Ändra inkodad sändare:

Inställningar	Klienter	Sven	Sven	Sven
Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Ändre grupp ↓ Ställ in klocka	Ny klient Peterson → Sven Alla sändare	Rom 10 → TX901 Ny sändare Gruppval ↓ Klientnamn	↑ Ljudsignal 1 Sändar tekst Ändra Ljud → Larmtext ↓ Larm: Alla	↑ Ändra Ljud Larmtext Larm: Alla Tidsplanering → Ta bort
TX901 ID: 60372 Ver.: 1.0 Ljudsignal 1				

Produktnamn på sändaren.
Sändarens ID.
Sändarens mjukvaruversion.
Vald ljudsignal när larm tas emot.

Ändra text i sändaren:

Sven	Sändar tekst
↑ Ljudsignal 1 → Sändar tekst Ändra Ljud Larmtext ↓ Larm: Alla	Spara? ◆ 456789 a b c d Ange sändar text

↑ ↓ Flytta bokstav.

Ent Välj bokstav.

Esc Ta bort den senaste bokstaven.

För att spara valt namn välj symbol ◆ och tryck Ent.

Ändra ljudsignalen för larm:

Sven	Sven
↑ Ljudsignal 1 Sender tekst → Ändra Ljud Larmtext ↓ Larm: Alla	TX901 Handsändare Ljudsignal 1 ↓ 1 2 3 4 5

↑ ↓ Bläddra mellan olika ljudsignaler.

Ent Välj ljudsignal.

Ändra larmtext/samtalstext:

Sven	Ändre text	1 Grön knapp
↑ Ljudsignal 1 Sender tekst Ändra Ljud → Larmtext ↓ Larm: Alla	→ 1 Grön knapp 2 Röd knapp 3 Gul knapp 4 Blå knapp ↓ KNOP knapp	Alarm knapp → 1 Grön knapp 2 Röd knapp 3 Gul knapp ↓ 4 Blå knapp

Här är ett TX901-exempel.



Återställ larmtext/samtalstext:

Sven	Ändra text	Larmtext
↑ Ljudsignal 1 Sender tekst Ändra Ljud → Larmtext ↓ Larm: Alla	↑ Extern 2 Extern 3 Extern 4 Lågt batteri → Återställa text	Återställa text Bekräfta? <div> </div>

Larm:

Sven	Sven
↑ Sender tekst Ändra Ljud Larmtext → Larm: Normal ↓ Tidsplanering	↑ Sender tekst Ändra Ljud Larmtext → Larm: Alla ↓ Tidsplanering

Skifta mellan **Normal** och **Alla**.

Tidsstyrning av sändaren:

Sven	Sven
↑ Ändra Ljud Larmtext Larm: Normal → Tidsplanering Ta bort	→ Tidsinst.:Från Start 1 00:00 Sluta 1 00:00 Start 2 00:00 Sluta 2 00:00

Skifta mellan **Från** och **Till**.

Ändra timme/minuter.

Växla mellan timmar och minuter.

Ta bort sändare hos klient:

Sven	Sven
↑ Ändra Ljud Larmtext Larm: Normal Tidsplanering → Ta bort	Ta bort: TX901 Bekräfta? <div> </div>

Tryck för att bekräfta.



Namnge grupp:

Inställningar	Grupp
Ver: 3.8.1	Grupp: 1
ID: 123456	
Klienter	↓
→ Ändra grupp	1 2 3 4 5 6 7 8
↓ Ställ in klocka	

↓ ↑ Flytta pilen mellan grupper.
 Ent Välj gruppen.

Aktiveringstiden från och till:

Grupp: 1	Grupp: 1
→ Tidsinst.:Från	→ Tidsinst.:Till
Gruppenamn	Gruppenamn
Tidsplanering	Tidsplanering

Ent Skifta mellan **Från** och **Till**.
 Esc Återgå till menyn.

Tips: Glöm ej att ställa in tiden i "inställningar - ställ in klocka".

Ändra gruppsnamn:

Grupp: 1	Grupp: 1
Tidsinst.:Från	Spara?
→ Gruppenamn	◆ 4 5 6 7 8 9 a b c d
Tidsplanering	Grupp: 1
	Ange gruppsnamn

↓ ↑ Flytta bokstav.
 Ent Välj bokstav.
 Esc Ta bort den senaste bokstaven.
 För att spara valt namn välj symbol ◆ och tryck Ent.

Ändra aktiveringstiden:

Grupp: 1	Grupp: 1
Tidsinst.:Från	Start 07:00
Gruppenamn	Sluta 15:00
→ Tidsplanering	

↓ ↑ Ändra timmar och minuter.
 Ent Skifta mellan timmar och minuter.
 Esc Återgå till menyn.

Ställ in klockan:

Inställningar	Ställ in klocka
↑ ID: 123456	2020-03-12
Klienter	16:42
Ändra grupp	År: 2020
→ Ställ in klocka	
↓ Klick: Låg	

↓ ↑ Ändra inställning.
 Ent Välj år, månader, tid, datum.

Obs: Om mottagaren får en klockuppdatering från en KNOP produkt eller USB901 ställs klockan in automatiskt därefter.



Knappljud:

Inställningar	Inställningar
↑ Klienter	↑ Klienter
Ändra grupp	Ändra grupp
Ställ in klocka	Ställ in klocka
→ Klick: Låg	→ Klick: Hög
↓ Produktnamn	↓ Produktnamn

- Ent Skifta mellan **Låg**, **Hög** och **Från**.
 Esc Återgå till menyn

Ändra mottagarens namn:

Inställningar	Namn
↑ Ändra grupp	Spara?
Ställ in klocka	◆ 456789 a b c d
Klick: Låg	RX901
→ Produktnamn	Ange
↓ Lösenord	produktnamn

- ↑ ↓ Flytta bokstav.
 Ent Välj bokstav.
 Esc Ta bort den senaste bokstaven.
 För att spara valt namn välj symbol ◆ och tryck Ent.

Välj lösenord:

Inställningar	Lösenord
↑ Ställ in klocka	Ny kod
Klick: Hög	↓
Namn	Kod: 0
→ Lösenord	
↓ Utgående	

- ↑ ↓ Ändra siffra (0 till 9).
 Ent Välj siffra.
 Esc Ta bort den senaste siffran.

Koden skall alltid vara 4 siffror.
 "0000" betyder ingen kod.

Ändring av funktionen för KNOP-logotypen:

Inställningar	Utgående
↑ Klick: Hög	→ Larm: Alla
Produktnamn	
Lösenord	
→ Utgående	
↓ Systemmenyn	

- Ent Välj mellan **Från**, **Normal** eller **Alla**.

Anslutning och ändring av systemkod:

Inställningar	Systemmenyn
↑ Produktnamn	→ System: Från
Lösenord	ID: 12345
Utgående	
→ Systemmenyn	
↓ Positioner	

Tryck Ent för att växla mellan "System: Av" och "System: På".



Ställ in system-ID:

Systemmenyn
System: Från
→ ID: 12345

System ID
Ange ID
på MR902
↓
ID: 12345

↑ ↓ Ändra värdet (0 till 9).
Ent Välja nummer.
Esc Radera den sista siffran.

Positioner:

Inställningar
↑ Lösenord
Utgående
Systemmenyn
→ Positioner
↓ Språk

Positioner
Entredörr
→ Visa position
Lägga till
Entredörr


Positioner
Kode: 101
→ Visa position
Lägga till

Entredörr
Entredörr

Nuvarande position.
Redan kodad.



Visa position:

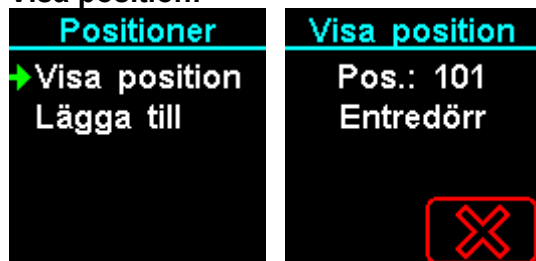

Visar aktuell placering vart du befinner dig.

Lägga till position:



Ent Spara position

Observera att mottagen måste vara inom räckhåll för ett positionsfält.

Ändra positions namn:




↑ **↓** Flytta bokstav.

Ent Välj bokstav.

Esc Ta bort den senaste bokstaven.

För att spara valt namn välj symbol ♦ och tryck **Ent**.

Ta bort position:

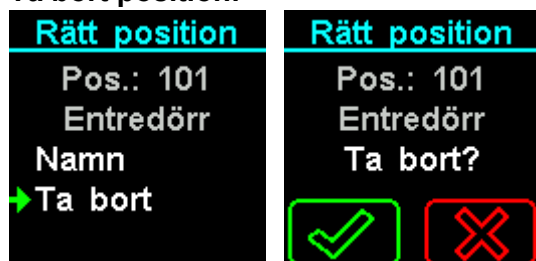

Ent Ta bort positionen.

Esc Återgå till menyn

Inställningar och språk:




↑ **↓** Flytta pilen för val av språk.

Ent Bekräfta nytt språk.



Stäng av mottagare:

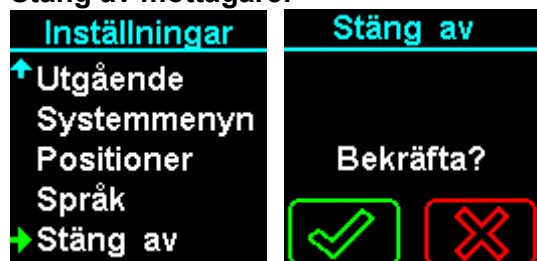

Ent Bekräfta stäng av.

För att slå på mottagaren, placera mottagaren på laddaren.



Underhåll

Programuppdatering av RX901B:

Det är möjligt att uppdatera programvaran i RX901B, liksom att ladda ner och överföra inställningar med KNOptool. För ytterligare beskrivningar hänvisas till KNOptool-manualen.

Rengöring

Produkten kan rengöras med en fruktig trasa eller en torkduk.

Reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör kan beställas från Knop Elektronik A/S, se www.knop.se.



Kontrollera täckningsområdet

En person aktiverar en sändare (till exempel TX901) med korta intervaller, medan en annan person systematiskt går runt i området och markerar på en skiss över byggnaden och det område där det finns täckning. Skissen placeras på kontoret så att alla som ska sköta systemet kan se var det finns täckning. Utanför täckningsområdet kan larm inte tas emot.

Täckningsområdet kan utökas med hjälp av KNOP-repeater-systemet.

Kontakta din återförsäljare för mer information.



Tekniska data

Batteri:	Litiumbatteri, LP403040 3,7V 450mA
Drifttid med batteri:	Ungefär 3 dygn med 50 larmsamtal per dygn.
Uppladdning:	Trådlöst, ca. 4 timmar.
Strömförsörjningsenhet:	230VAC-adapter USB 5VDC/1,0A
Frekvens HF:	869.2125 MHz ⁽¹⁾
Räckvidd:	Upp till 1500 m fri räckvidd för en RX901B ⁽²⁾
Skärm:	Grafisk LCD
Menytexter:	Danska, norska, svenska, finsk, engelsk och tysk.
Loggfunktion:	Sparar de senaste 50 larmsamtalen.
Minne:	250 sändare 150 positioner POS901
Omgivande miljö:	Användning inomhus. <90 % luftfuktighet utan kondens.
Omgivningstemperatur:	0 - 40°C
Typ av skåp:	Färg RAL9003 ABS
Mått på skåpet:	45 x 90 x 16 mm. Inkl. nackrem med säkerhetslås som bryts när man drar i den.
Täthet:	IP65
Vikt inkl. batterier:	56g
Beräknad livslängd:	6 år (exklusive batterier)

Rätten till ändringar är förbehållet

All rights reserved.

© **KNOP** Elektronik A/S

⁽¹⁾ Vid anslutning till KNOPs repeatersystem används även 868,049/100/150 MHz.

⁽²⁾ Uppmätt utomhus med fri sikt mellan sändare och mottagare. I byggnader minskar räckvidden.

Symbolförklaring och godkännanden

	<p>Denna produkt uppfyller dessa direktiv och standarder:</p> <table border="0"> <tr> <td>Directive 2017/745/EU</td><td>MDR</td></tr> <tr> <td>Directive 1907/2006/EU</td><td>REACH</td></tr> <tr> <td>Directive 2011/65/EU</td><td>RoHS</td></tr> <tr> <td>Directive 2012/19/EU</td><td>WEEE</td></tr> <tr> <td>ISO 14971:2019</td><td>Risk Management for Medical devices</td></tr> <tr> <td>EN 301 498-1 V2.2.3</td><td>Electro Magnetic Compatibility</td></tr> <tr> <td>EN 301 489-3 V3.1.1</td><td>Electro Magnetic Compatibility</td></tr> <tr> <td>EN 50130-4:2011 + 2014</td><td>Immunity alarm systems</td></tr> <tr> <td>EN 300 220-1 V3.1.1</td><td>Short Range Devices</td></tr> <tr> <td>EN 300 220-2 V3.1.1</td><td>Short Range Devices</td></tr> <tr> <td>EN 300 220-3 V2.1.1</td><td>Short Range Devices</td></tr> <tr> <td>EN 60601-1-2:2014 + 2015</td><td>Electromagnetic compatibility (Medical)</td></tr> <tr> <td>EN 62368-1:2020</td><td>Electrical safety</td></tr> <tr> <td>EN 50581:2012</td><td>Hazardous substances</td></tr> </table>	Directive 2017/745/EU	MDR	Directive 1907/2006/EU	REACH	Directive 2011/65/EU	RoHS	Directive 2012/19/EU	WEEE	ISO 14971:2019	Risk Management for Medical devices	EN 301 498-1 V2.2.3	Electro Magnetic Compatibility	EN 301 489-3 V3.1.1	Electro Magnetic Compatibility	EN 50130-4:2011 + 2014	Immunity alarm systems	EN 300 220-1 V3.1.1	Short Range Devices	EN 300 220-2 V3.1.1	Short Range Devices	EN 300 220-3 V2.1.1	Short Range Devices	EN 60601-1-2:2014 + 2015	Electromagnetic compatibility (Medical)	EN 62368-1:2020	Electrical safety	EN 50581:2012	Hazardous substances
Directive 2017/745/EU	MDR																												
Directive 1907/2006/EU	REACH																												
Directive 2011/65/EU	RoHS																												
Directive 2012/19/EU	WEEE																												
ISO 14971:2019	Risk Management for Medical devices																												
EN 301 498-1 V2.2.3	Electro Magnetic Compatibility																												
EN 301 489-3 V3.1.1	Electro Magnetic Compatibility																												
EN 50130-4:2011 + 2014	Immunity alarm systems																												
EN 300 220-1 V3.1.1	Short Range Devices																												
EN 300 220-2 V3.1.1	Short Range Devices																												
EN 300 220-3 V2.1.1	Short Range Devices																												
EN 60601-1-2:2014 + 2015	Electromagnetic compatibility (Medical)																												
EN 62368-1:2020	Electrical safety																												
EN 50581:2012	Hazardous substances																												
	<p>Produkten får inte användas om förpackningen är skadad.</p>																												
	<p>Medicinsk produkt Klass 1, regel 1</p>																												
	<p>Producent KNOP Elektronik A/S, Fabriksvej 20, DK-7600 Struer, Danmark</p>																												
	<p>Läs manual(er) före installation och idrifttagning. På vår hemsida www.knop.se.</p>																												
	<p>Interferens kan förekomma i en miljö med utrustning som är märkt med den här symbolen.</p>																												
	<p>Måste skyddas mot vätskor.</p>																												
	<p>0 °C till +40 °C, temperaturgräns för transport/förvaring och användning.</p>																												
	<p>Produkten får inte slängas med vanligt hushållsavfall.</p>																												
	<p>Enskilt registreringsnummer DK-MF-000025631</p>																												
	<p>Unik enhetskod för identifiering av enheten 05744002850298</p>																												
	<p>Produktreferens/produktnummer Mottagare RX901B, inkl. trådlös laddare.</p>																												
	<p>Serienummer Placerad på produkten</p>																												
	<p>Kod för intrångsskydd IP65</p>																												