

Bruksanvisning

RX901B





Innehållsförteckning

Varningar och säkerhetsanvisningar	3
Avsedd användning	4
Driftsättning	5
Startskärmen	6
Nödsamtal	8
Klienter och sändare	10
Huvudmeny	11
Underhåll	23
Rengöring	23
Reservdelar och tillbehör	23
Kontrollera täckningsområdet	24
Tekniska data	25
Symbolförklaring och godkännanden	26



Varningar och säkerhetsanvisningar



- Batteriet i den här produkten uppfyller de relevanta IEC-säkerhetsstandarderna för batterier.
- Läs säkerhetsinstruktionerna på nätaggregatet innan du använder det.
- Strömförsörjningsenheten måste uppfylla relevanta IEC-säkerhetsstandarder.
- När du byter ut strömförsörjningsenheten eller laddningsplattan måste du använda original och/eller godkända enheter.
- Batteriet får inte bytas ut, utan produkten måste skickas för reparation.
- Läs den avsedda användningen innan du tar den i bruk.



Avsedd användning

RX901B är en mottagare som är utformad för att fungera med KNOP:s trådlösa enheter.

Enheten kan bäras i en ficka eller på ett halsband runt halsen.

Upp till 250 sändare kan kodas och tilldelas ett valfritt namn.

De senaste 50 samtalen lagras i en lista där du kan se tiden för samtalet, var samtalet kom ifrån och om det bekräftades.

Med en RX901B är det till exempel möjligt att dela in klient(boende) på en vårdinstitution i grupper, till exempel i samband med skiftplaner, där nattskiftet måste betjäna fler klienter än dagskiftet.

RX901B är utrustad med en positionsläsare, så den kan användas i KNOP positionerings-systemet.

Med RX901B är det möjligt att ringa ett nödsamtal till en annan kollega med en enda beröring.

Användningen är menystrukturerad i en grafisk display och styrs med hjälp av tangentbordet.

RX901B är utrustad med ett uppladdningsbart batteri och trådlös laddning.

Produkten är vattentät (IP65).

Driftsättning

Det rekommenderas att RX901B laddas till 100 % innan den används.

Den medföljande trådlösa laddaren ansluts till adaptorn via USB-kabeln.

RX901B placeras ovanpå laddningsplattan och RX901B:s display tänds och visar batteriets laddningsnivå i procent.

Om enheten är helt urladdad kan det ta upp till 5 minuter innan displayen tänds.

Paketets innehåll:






RX901B i laddaren:



När produkten slås på första gången måste det önskade språket väljas.



Tryck   för att flytta den gröna pilen till önskat språk.

Tryck  för att välja språk.



Startskärmen

Första gången enheten ska sättas på efter upppackning ska den placeras på laddaren.

När RX901B inte är ansluten till laddaren stängs skärmen av cirka 10 sekunder efter den senaste åtgärden.

Om du trycker på någon tangent slås displayen på och visar klockan och datumet.

Användarens namn visas överst om det är kodat på annat sätt "RX901B".



Alternativ för startskärmen:



Namnet på t.ex. en produkt eller en plats kan ändras till önskat namn.



Aktuell tid och datum visas i vit text.



Klockan måste ställas in.

Batteriläge:

- Batteri OK.
- Laddning rekommenderas.
- Batteriet är nästan slut och behöver laddas.

Larmjud:

- Larmjudet är påslaget.
- Larmjudet är avstängt.

Vibrator:

- Vibratorn är aktiverad.
- Vibratorn är avstängd.

System - visas endast om systemet är anslutet:

- Systemet är anslutet.
- Ansluts till systemet.
- Avbrott i systemets signal.
- Systemsignalen har gått förlorad.

Tryck för att se samtalslistan.




Mottagning av larm


När mottagaren tar emot ett larm från en kodad sändare visas namn, typ och tidpunkt för mottagningen samt eventuell position.



Klientens namn
Namnet på den valda platsen i huset.
Typ av sändare.
Positionering för larmet.
Nödknapp/funktion.

De enskilda texterna visas endast om de är kodade eller kända.

Tryck  för att bekräfta larmet.


Tryck  för att förkasta.

Obs: I det enkla systemet hanteras larmsamtalen på samma sätt, oavsett om det accepteras eller avvisas, i stället för som i KNOP:s repeater-system (MR90X/RP90X) där larmet automatiskt vidarebefordras till andra mottagare.

Om larmet inte besvaras hörs korta ljud ungefär var femte minut.

När ett meddelande tas emot från en sändare, t.ex. med lågt batteri, visas nedanstående meddelande.



Tryck  för att bekräfta larmet.

Obs: "Senaste samtal" visar meddelandet "långt batteri" för den sändare där batteriet måste bytas ut.




Nödsamtal

Det är möjligt att skicka ett nödsamtal (eller larm) från mottagaren till exempel andra användare för att ange "Jag behöver hjälp" hos en klient eller som ett överfallslarm.

Nödsamtalet aktiveras genom att trycka på KNOP-logotypen.

När nödsamtalet skickas vibrerar mottagaren en gång och när nödsamtalet tas emot av en annan användare vibrerar mottagaren tre gånger.

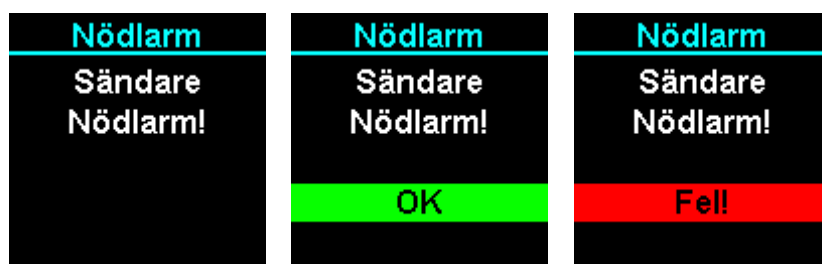



Batterilarm

Mottagaren indikerar batteristatusen på displayen och vid urladdat batteri med ljudindikationer.

Batteriläge:

-  Batteri OK.
-  Laddning rekommenderas.
-  Batteriet är nästan slut och behöver laddas.

Om symbolen ändras till rött ska du omedelbart sätta enheten i laddaren. Samtidigt hörs några korta pip ungefär var femte minut, vilket indikerar lågt batteri, medan skärmen nedan visas:





Klienter och sändare

Innan du kan koda en sändare i mottagaren måste du skapa en klient som sändaren tillhör.

En klient kan vara en person, ett rum eller något annat. klienten kan till exempel vara "Andersson" (som används som exempel).

Vår klient "Sven" kan ha en eller flera sändare som är kopplade till den.

Sven (vår klient) har till exempel en armbandssändare, ett sängalarm, en rörelsesensor och andra produkter.

När "Sven" aktiverar ett larm från sina produkter visar displayen att larmet kommer från "Sven" och vilken produkt som är avsändare, så att orsaken till larmet är känd från början.

Detta förutsätter naturligtvis att namn etc. kodas på önskat sätt.

Klienter skapade under Inställningar / Klient / Ny klient:



Huvud meny	Inställningar	Klienter
↑ Stäng (sova) Gruppval Vibration: Till Ljud: Från → Inställningar	Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Ändre grupp ↓ Ställ in klocka	→ Ny klient Sven Alla sändare

Lägg till under Inställning / Klient / Klient (Sven) / Ny Sändare:

Huvud meny	Inställningar	Klienter	Sven
↑ Stäng (sova) Gruppval Vibration: Till Ljud: Från → Inställningar	Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Ändre grupp ↓ Ställ in klocka	Ny klient → Sven Alla sändare	Rom 10 TX901 → Ny sändare Gruppval Klientnamn ↓




Huvudmeny


Om du trycker på  och  samtidigt, antingen när skärmen är avstängd eller på startskärmen, öppnas huvudmenyn.

Den gröna pilen till vänster visar vilken rad i menyn som kan väljas.



Knapparnas funktion:

Tryck  för att flytta den gröna pilen antingen uppåt eller åt höger i menyn.

Tryck  för att flytta den gröna pilen antingen nedåt eller åt vänster i menyn.

Tryck  för att lämna menyn.

Tryck  för att välja menyalternativet med den gröna pilen bredvid.

OBS: Efter c:a 60 sekunders inaktivitet avslutas menyn automatiskt.

Senaste larm:



Tryck   för att bläddra mellan olika larm.





Betyder att larmet blev accepterat.

Betyder att larmet blev avvisat.

Betyder att larmet blev obesvarat.

Se mer information kring larmen:

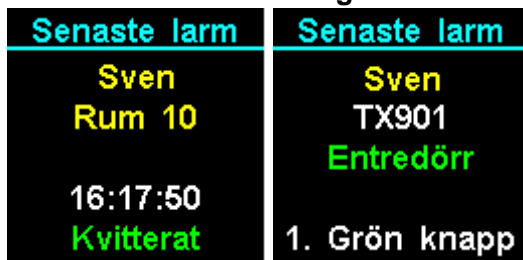

Tryck  för att se vad klientens positionering och vilken sändare larmet kommer ifrån.

Tryck   för att bläddra mellan flera larm.



När man tar emot ett larm från en sändare som har t.ex. ett dåligt batteri visas meddelandet.

  för att bläddra mellan andra larmsamtal.




Radera samtalslistan:




Tryck **Ent** för att bekräfta.

Stäng mottagaren:

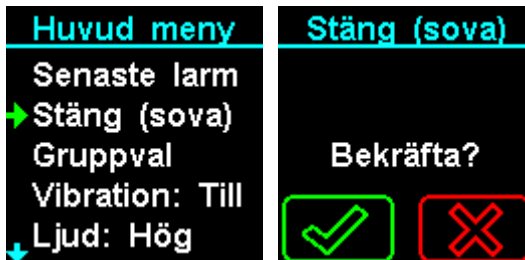

Ent För att bekräfta eller **Esc** för att avvisa.
Mottagaren slås på genom ett tryck på **Ent**.


Urval av grupp:

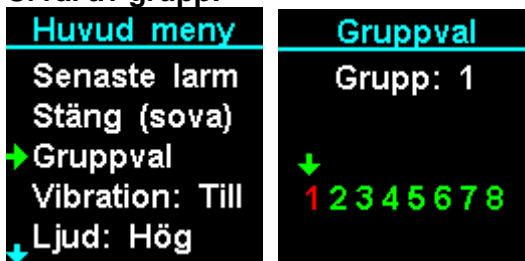

Ent Välja eller avmarkera en grupp.
Esc Återgå till menyn.
↓ ↑ Flytta pilen till den grupp du vill ändra.

1 Grupp markerad
1 Grupp avmarkerad

Vibratorfunktion:

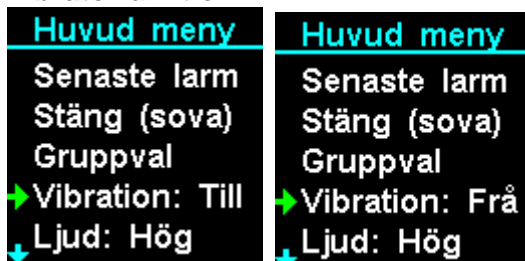

Ent Aktivera eller avmarkera vibratorfunktionen.
Esc Återgå till menyn.

Ljudinställning:



Ent Välj **Hög**, **Låg** eller **Från** ljud för larmsamtal.



Inställningar och kodning:

<p>Huvud meny</p> <p>↑ Stäng (sova) Gruppval Vibration: Till Ljud: Från → Inställningar</p>	<p>Inställningar</p> <p>Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Ändre grupp ↓ Ställ in klocka</p>	<p>Inställningar</p> <p>↑ Ställ in klocka Klick: Låg Produktnamn → Lösenord ↓ Utgående</p>	<p>Inställningar</p> <p>↑ Utgående Systemmenyn Positioner Språk → Stäng av</p>
--	---	---	---

Ver: 3.3.14 Produktens programvaruversion.

ID: 58651 Produktens serienummer.

Lägg till ny klient:

<p>Inställningar</p> <p>Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Ändre grupp ↓ Ställ in klocka</p>	<p>Klienter</p> <p>→ Ny klient Sven</p>
---	---

Ställ pilen på menyvalet och tryck **Ent**.

Ändra klient:

<p>Inställningar</p> <p>Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Ändre grupp ↓ Ställ in klocka</p>	<p>Klienter</p> <p>Ny klient → Sven Alla sändare</p>	<p>Sven</p> <p>Rom 10 → TX901 Ny sändare Gruppval Klientnamn</p>
---	--	--

Sven Klientens namn.

Rum 10 Valfri text, namn på t.ex. rum.

→ **TX901** Produkt som redan är inkodade på klienten.



Lägg till sändare:

Sven	Lägga till
Rom 10 TX901 → Ny sändare Gruppval ↓ Klientnamn	Aktivera ny sändare...

Aktivera nu den önskade sändaren.

Lägga till
ID: 64067 RX901B Lägga till?

Acceptera tillägg.

Lägga till
Överför från: Svenson Bekräfta?

Om sändaren redan är kodad visas nedanstående meny, så att du kan flytta en sändare mellan klienter.

Klienten tillhör dessa grupper:

Sven	Sven
Rom 10 TX901 Ny sändare → Gruppval ↓ Klientnamn	Gruppval Gruppe: 1 ↓ 1 2 3 4 5 6 7 8

Flytta mellan grupper.
Ent Välja eller bortvald en grupp.

1 Grupp som valts.
1 Grupp som är bortvald.

Klientens namn:

Sven	Klientnamn
↑ TX901 Ny sändare Gruppval → Klientnamn ↓ Klienttext	Spara? ◆ 456789 a b c d Sven Ange klientnamn

Flytta bokstav.
Ent Välj bokstav.
Esc Ta bort den senaste bokstaven.

För att spara valt namn välj symbol ◆ och tryck **Ent**.



Klientens valfria text:

Sven	Sven
↑ Ny sändare	Spara?
Gruppval	◆456789abcd
Klientnamn	Rom 10
→ Klienttext	Ange
Ta bort	klienttext

Flytta bokstav.

Välj bokstav.

Ta bort den senaste bokstaven.

För att spara valt namn välj symbol ◆ och tryck .



Ändra inkodad sändare:

Inställningar Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Ändre grupp Ställ in klocka	Klienter Ny klient Peterson → Sven Alla sändare	Sven Rom 10 → TX901 Ny sändare Gruppval Klientnamn	Sven ↑ Ljudsignal 1 Sändar tekst Ändra Ljud → Larmtext Larm: Alla	Sven ↑ Ändra Ljud Larmtext Larm: Alla Tidsplanering → Ta bort
--	--	---	---	---

TX901
ID: 60372
Ver.: 1.0
Ljudsignal 1

Produktnamn på sändaren.
Sändarens ID.
Sändarens mjukvaruversion.
Vald ljudsignal när larm tas emot.

Ändra text i sändaren:

Sven ↑ Ljudsignal 1 → Sändar tekst Ändra Ljud Larmtext Larm: Alla	Sändar tekst Spara? ◆ 456789abcd Ange sändar text
---	--

↑ ↓ Flytta bokstav.

Ent Välj bokstav.

Esc Ta bort den senaste bokstaven.

För att spara valt namn välj symbol ◆ och tryck Ent.

Ändra ljudsignalen för larm:

Sven ↑ Ljudsignal 1 Sender tekst → Ändra Ljud Larmtext Larm: Alla	Sven TX901 Handsändare Ljudsignal 1 ↓ 1 2 3 4 5
---	---

↑ ↓ Bläddra mellan olika ljudsignaler.

Ent Välj ljudsignal.

Ändra larmtext/samtalstext:

Sven ↑ Ljudsignal 1 Sender tekst Ändra Ljud → Larmtext Larm: Alla	Ändre text → 1 Grön knapp 2 Röd knapp 3 Gul knapp 4 Blå knapp KNOP knapp	1 Grön knapp Alarm knap → 1 Grön knapp 2 Röd knapp 3 Gul knapp 4 Blå knapp
---	--	--

Här är ett TX901-exempel.



Återställ larmtext/samtalstext:

Sven	Ändra text	Larmtext
↑ Ljudsignal 1 Sender tekst Ändra Ljud → Larmtext ↓ Larm: Alla	↑ Extern 2 Extern 3 Extern 4 Lågt batteri → Återställa text	Återställa text Bekräfta? <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ✓ ✗ </div>

Larm:

Sven	Sven
↑ Sender tekst Ändra Ljud Larmtext → Larm: Normal ↓ Tidsplanering	↑ Sender tekst Ändra Ljud Larmtext → Larm: Alla ↓ Tidsplanering

Ent Skifta mellan **Normal** och **Alla**.

Tidsstyrning av sändaren:

Sven	Sven
↑ Ändra Ljud Larmtext Larm: Normal → Tidsplanering Ta bort	→ Tidsinst.:Från Start 1 00:00 Sluta 1 00:00 Start 2 00:00 Sluta 2 00:00

Ent Skifta mellan **Från** och **Till**.

↕ 🏠 Ändra timme/minuter.

Ent Växla mellan timmar och minuter.

Ta bort sändare hos klient:

Sven	Sven
↑ Ändra Ljud Larmtext Larm: Normal Tidsplanering → Ta bort	Ta bort: TX901 Bekräfta? <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ✓ ✗ </div>

Tryck Ent för att bekräfta.



Namnge grupp:

Inställningar	Grupp
Ver: 3.8.1 ID: 123456 Klienter → Ändra grupp ↓ Ställ in klocka	Grupp: 1 ↓ 1 2 3 4 5 6 7 8

- ↓ ↑ Flytta pilen mellan grupper.
- Ent Välj gruppen.

Aktiveringstiden från och till:

Grupp: 1	Grupp: 1
→ Tidsinst.:Från Gruppenamn Tidsplanering	→ Tidsinst.:Till Gruppenamn Tidsplanering

- Ent Skifta mellan **Från** och **Till**.
- Esc Återgå till meny.

Tips: Glöm ej att ställa in tiden i "inställningar - ställ in klocka".

Ändra gruppnamn:

Grupp: 1	Grupp: 1
→ Tidsinst.:Från Gruppenamn Tidsplanering	Spara? ◆456789 a b c d Grupp: 1 Ange gruppenamn

- ↓ ↑ Flytta bokstav.
 - Ent Välj bokstav.
 - Esc Ta bort den senaste bokstaven.
- För att spara valt namn välj symbol ◆ och tryck Ent.

Ändra aktiveringstiden:

Grupp: 1	Grupp: 1
→ Tidsinst.:Från Gruppenamn Tidsplanering	Start 07 :00 Sluta 15 :00

- ↓ ↑ Ändra timmar och minuter.
- Ent Skifta mellan timmar och minuter.
- Esc Återgå till meny.

Ställ in klockan:

Inställningar	Ställ in klocka
↑ ID: 123456 Klienter Ändra grupp → Ställ in klocka ↓ Klick: Låg	2020-03-12 16:42 År: 2020

- ↓ ↑ Ändra inställning.
- Ent Välj år, månader, tid, datum.

Obs: Om mottagaren får en klockuppdatering från en KNOP produkt eller USB901 ställs klockan in automatiskt därefter.



Knappljud:

Inställningar	Inställningar
↑ Klienter	↑ Klienter
Ändra grupp	Ändra grupp
Ställ in klocka	Ställ in klocka
→ Klick: Låg	→ Klick: Hög
↓ Produktnamn	↓ Produktnamn

Ent Skifta mellan **Låg**, **Hög** och **Från**.

Esc Återgå till menyn

Ändra mottagarens namn:

Inställningar	Namn
↑ Ändra grupp	Spara?
Ställ in klocka	◆ 456789 a b c d
Klick: Låg	RX901
→ Produktnamn	Ange
↓ Lösenord	produktnamn

↑ ↓ Flytta bokstav.

Ent Välj bokstav.

Esc Ta bort den senaste bokstaven.

För att spara valt namn välj symbol ◆ och tryck **Ent**.

Välj lösenord:

Inställningar	Lösenord
↑ Ställ in klocka	Ny kod
Klick: Hög	↓
Namn	Kod: 0
→ Lösenord	
↓ Utgående	

↑ ↓ Ändra siffra (0 till 9).

Ent Välj siffra.

Esc Ta bort den senaste siffran.

Koden skall alltid vara 4 siffror.
"0000" betyder ingen kod.

Ändring av funktionen för KNOP-logotypen:

Inställningar	Utgående
↑ Klick: Hög	→ Larm: Alla
Produktnamn	
Lösenord	
→ Utgående	
↓ Systemmenyn	

Ent Välj mellan **Från**, **Normal** eller **Alla**.

Anslutning och ändring av systemkod:

Inställningar	Systemmenyn
↑ Produktnamn	→ System: Från
Lösenord	ID: 12345
Utgående	
→ Systemmenyn	
↓ Positioner	

Tryck **Ent** för att växla mellan "System: Av" och "System: På".



Ställ in system-ID:

<p>Systemmenyn</p> <p>System: Från → ID: 12345</p>	<p>System ID</p> <p>Ange ID på MR902</p> <p>↓</p> <p>ID: 12345</p>
---	---

- Ändra värdet (0 till 9).
- Välja nummer.
- Radera den sista siffran.

Positioner:

<p>Inställningar</p> <p>↑ Lösenord Utgående Systemmenyn → Positioner ↓ Språk</p>	<p>Positioner</p> <p>Entredörr → Visa position Lägga till Entredörr</p>	<p>Positioner</p> <p>Kode: 101 → Visa position Lägga till</p>
<p>Entredörr Entredörr</p>	<p>Nuvarande position. Redan kodad.</p>	



Visa position:

Positioner	Visa position
→ Visa position Lägga till	Pos.: 101 Entredörr

Visar aktuell placering vart du befinner dig.

Lägga till position:

Positioner	Ny position
Kode: 101 Visa position → Lägga till	Pos.: 101 Lägga till?

Spara position

Observera att mottagen måste vara inom räckhåll för ett positionsfält.

Ändra positions namn:

Rätt position	Positionsnamn
Pos.: 101 Entredörr → Namn Ta bort	Spara? no ♦ p q r s t u v w Dörr Ange positionsnamn

Flytta bokstav.

Välj bokstav.

Ta bort den senaste bokstaven.

För att spara valt namn välj symbol ♦ och tryck .

Ta bort position:

Rätt position	Rätt position
Pos.: 101 Entredörr Namn → Ta bort	Pos.: 101 Entredörr Ta bort?

Ta bort positionen.

Återgå till menyn

Inställningar och språk:


Inställningar	Språk
↑ Utgående Systemmenyn Positioner → Språk Stäng av	Dansk → Svenska Norsk Suomalainen ↓ English

Flytta pilen för val av språk.

Bekräfta nytt språk.



Stäng av mottagare:

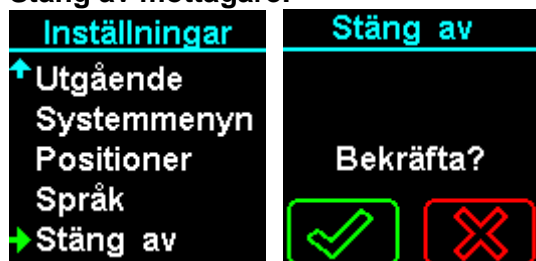

Ent Bekräfta stäng av.

För att slå på mottagaren, placera mottagaren på laddaren.



Underhåll

Programuppdatering av RX901B:

Det är möjligt att uppdatera programvaran i RX901B, liksom att ladda ner och överföra inställningar med KNOptool. För ytterligare beskrivningar hänvisas till KNOptool-manualen.

Rengöring

Produkten kan rengöras med en fruktig trasa eller en torkduk.

Reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör kan beställas från Knop Elektronik A/S, se www.knop.se.



Kontrollera täckningsområdet

En person aktiverar en sändare (till exempel TX901) med korta intervaller, medan en annan person systematiskt går runt i området och markerar på en skiss över byggnaden och det område där det finns täckning. Skissen placeras på kontoret så att alla som ska sköta systemet kan se var det finns täckning. Utanför täckningsområdet kan larm inte tas emot.

Täckningsområdet kan utökas med hjälp av KNOP-repeater-systemet.

Kontakta din återförsäljare för mer information.



Tekniska data

Batteri:	Litiumbatteri, LP403040 3,7V 450mA
Drifttid med batteri:	Ungefär 3 dygn med 50 larmsamtal per dygn.
Uppladdning:	Trådlöst, ca. 4 timmar.
Strömförsörjningsenhet:	230VAC-adapter USB 5VDC/1,0A
Frekvens HF:	869.2125 MHz ⁽¹⁾
Räckvidd:	Upp till 1500 m fri räckvidd för en RX901B ⁽²⁾
Skärm:	Grafisk LCD
Menytexter:	Danska, norska, svenska, finsk, engelsk och tysk.
Loggfunktion:	Sparar de senaste 50 larmsamtalen.
Minne:	250 sändare 150 positioner POS901
Omgivande miljö:	Användning inomhus. <90 % luftfuktighet utan kondens.
Omgivningstemperatur:	0 - 40°C
Typ av skåp:	Färg RAL9003 ABS
Mått på skåpet:	45 x 90 x 16 mm. Inkl. nackrem med säkerhetslås som bryts när man drar i den.
Täthet:	IP65
Vikt inkl. batterier:	56g

Rätten till ändringar är förbehållet















All rights reserved.

© **KNOP** Elektronik A/S

⁽¹⁾ Vid anslutning till KNOPs repeatersystem används även 868,049/100/150 MHz.

⁽²⁾ Uppmätt utomhus med fri sikt mellan sändare och mottagare. I byggnader minskar räckvidden.

Symbolförklaring och godkännanden

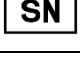	<p>Denna produkt uppfyller dessa direktiv och standarder:</p> <table border="0"> <tr> <td>Directive 2017/745/EU</td> <td>MDR</td> </tr> <tr> <td>Directive 1907/2006/EU</td> <td>REACH</td> </tr> <tr> <td>Directive 2011/65/EU</td> <td>RoHS</td> </tr> <tr> <td>ISO 14971:2019</td> <td>Risk Management for Medical devices</td> </tr> <tr> <td>EN 301 498-1 V2.2.3</td> <td>Electro Magnetic Compatibility</td> </tr> <tr> <td>EN 301 489-3 V3.1.1</td> <td>Electro Magnetic Compatibility</td> </tr> <tr> <td>EN 50130-4:2011 + 2014</td> <td>Immunity alarm systems</td> </tr> <tr> <td>EN 300 220-1 V3.1.1</td> <td>Short Range Devices</td> </tr> <tr> <td>EN 300 220-2 V3.1.1</td> <td>Short Range Devices</td> </tr> <tr> <td>EN 300 220-3 V2.1.1</td> <td>Short Range Devices</td> </tr> <tr> <td>EN 60601-1-2:2014 + 2015</td> <td>Electromagnetic compatibility (Medical)</td> </tr> <tr> <td>EN 62368-1:2020</td> <td>Electrical safety</td> </tr> <tr> <td>EN 50581:2012</td> <td>Hazardous substances</td> </tr> </table>	Directive 2017/745/EU	MDR	Directive 1907/2006/EU	REACH	Directive 2011/65/EU	RoHS	ISO 14971:2019	Risk Management for Medical devices	EN 301 498-1 V2.2.3	Electro Magnetic Compatibility	EN 301 489-3 V3.1.1	Electro Magnetic Compatibility	EN 50130-4:2011 + 2014	Immunity alarm systems	EN 300 220-1 V3.1.1	Short Range Devices	EN 300 220-2 V3.1.1	Short Range Devices	EN 300 220-3 V2.1.1	Short Range Devices	EN 60601-1-2:2014 + 2015	Electromagnetic compatibility (Medical)	EN 62368-1:2020	Electrical safety	EN 50581:2012	Hazardous substances
Directive 2017/745/EU	MDR																										
Directive 1907/2006/EU	REACH																										
Directive 2011/65/EU	RoHS																										
ISO 14971:2019	Risk Management for Medical devices																										
EN 301 498-1 V2.2.3	Electro Magnetic Compatibility																										
EN 301 489-3 V3.1.1	Electro Magnetic Compatibility																										
EN 50130-4:2011 + 2014	Immunity alarm systems																										
EN 300 220-1 V3.1.1	Short Range Devices																										
EN 300 220-2 V3.1.1	Short Range Devices																										
EN 300 220-3 V2.1.1	Short Range Devices																										
EN 60601-1-2:2014 + 2015	Electromagnetic compatibility (Medical)																										
EN 62368-1:2020	Electrical safety																										
EN 50581:2012	Hazardous substances																										
	<p>Produkten får inte användas om förpackningen är skadad.</p>																										
	<p>Medicinsk produkt Klass 1</p>																										
	<p>Producent KNOP Elektronik A/S, Fabriksvej 20, DK-7600 Struer, Danmark</p>																										
	<p>Läs manual(er) före installation och idrifttagning.</p>																										
	<p>Interferens kan förekomma i en miljö med utrustning som är märkt med den här symbolen.</p>																										
	<p>Måste skyddas mot vätskor.</p>																										
	<p>0 °C till +40 °C, temperaturgräns för transport/förvaring och användning.</p>																										
	<p>Produkten får inte slängas med vanligt hushållsavfall.</p>																										
	<p>Enskilt registreringsnummer DK-MF-000025631</p>																										
	<p>Unik enhetskod för identifiering av enheten 05744002850298</p>																										
	<p>Produktreferens/produktnummer Mottagare RX901B, inkl. trådlös laddare.</p>																										
	<p>Serienummer Placerad på produkten</p>																										
	<p>Kod för intrångsskydd IP65</p>																										